



Технические материалы

Перчаточный бокс из оргстекла / Акриловый перчаточный бокс

Модель: GBT

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/acrylic-glove-box.html>

09.10.2026 / TENCAN

Перчаточный бокс из оргстекла / Акриловый перчаточный бокс

Модель: GBT

Перчаточный бокс из оргстекла для работы в инертной атмосфере. Обеспечивает безопасное размещение образцов, работу и реакции в среде без кислорода и влаги. Идеален для научных исследований и испытаний.

Технические характеристики

Материал	Оргстекло / акрил
Уровень утечки	2 степени
Толщина стенки бокса	10~35mm

Параметры приведены для серии. Характеристики выбранной модели, питание и комплектацию уточните перед заказом.



Технические параметры

Модель перчаточного ящика из оргстекла

Описание номера перчаточного ящика

ГБТ Код продукта (Прозрачный перчаточный бокс)

10 Толщина материала (опционально 10 --- 30 мм)

A Размеры и модели (Тип A, Тип B, Тип C, Тип D)

Модель продукта	Размер коробки (мм)	Материал	Толщина шкафа (мм)	Размеры переходной комнаты	Примечание
GBT-10A	700×450×500	Оргстекло или акрил	10	никто	Изолированный и пыленепроницаемый, без пылесоса.
GBT-15A			15	240×240×240	Микровакуум может быть оснащен системой очистки от воды и кислорода.
GBT-30A			30		Вакуумировать до -0,1 МПа, заменить кислород и воду.
GBT-10B	1000×500×500	Оргстекло или акрил	10	никто	Изолированный и пыленепроницаемый, без пылесоса.
GBT-15B			15	240×240×240	Микровакуум может быть оснащен системой очистки от воды и кислорода.
GBT-30B			30		Вакуумировать до -0,1 МПа, заменить кислород и воду.
GBT-10C	1200×600×600	Оргстекло или акрил	10	никто	Изолированный и пыленепроницаемый, без пылесоса.
GBT-15C			15	240×240×240	Микровакуум может быть оснащен системой очистки от воды и кислорода.
GBT-30C			35		Вакуумировать до -0,1 МПа, заменить кислород и воду.
GBT-10D	1200×800×700	Оргстекло или акрил	10	никто	Изолированный и пыленепроницаемый, без пылесоса.
GBT-15D			15	240×240×240	Микровакуум может быть оснащен системой очистки от воды и кислорода.
GBT-30D			35		Вакуумировать до -0,1 МПа, заменить кислород и воду.

Специальная настройка



Материал




размер





форма





Другие требования к настройке


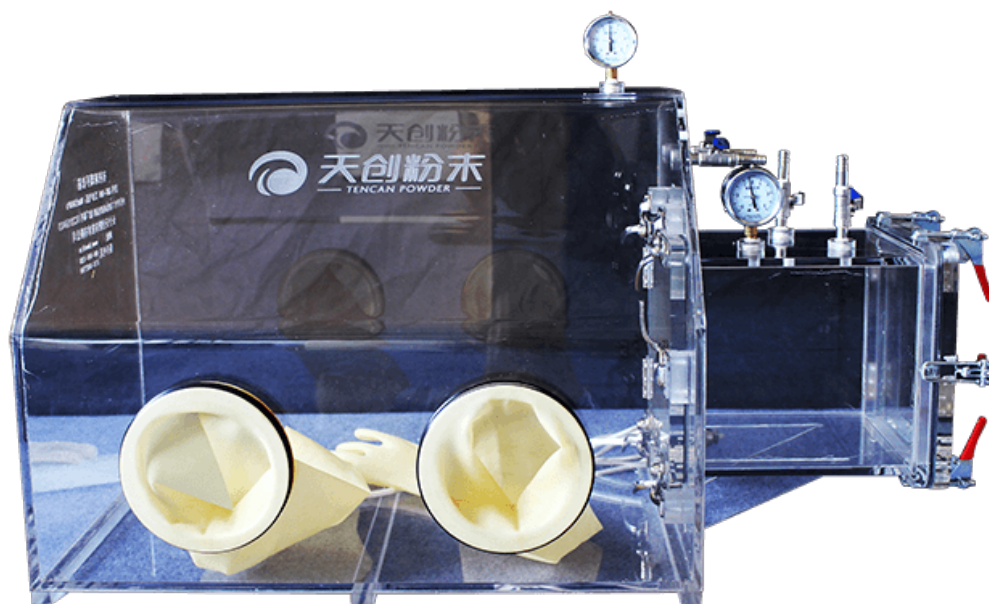


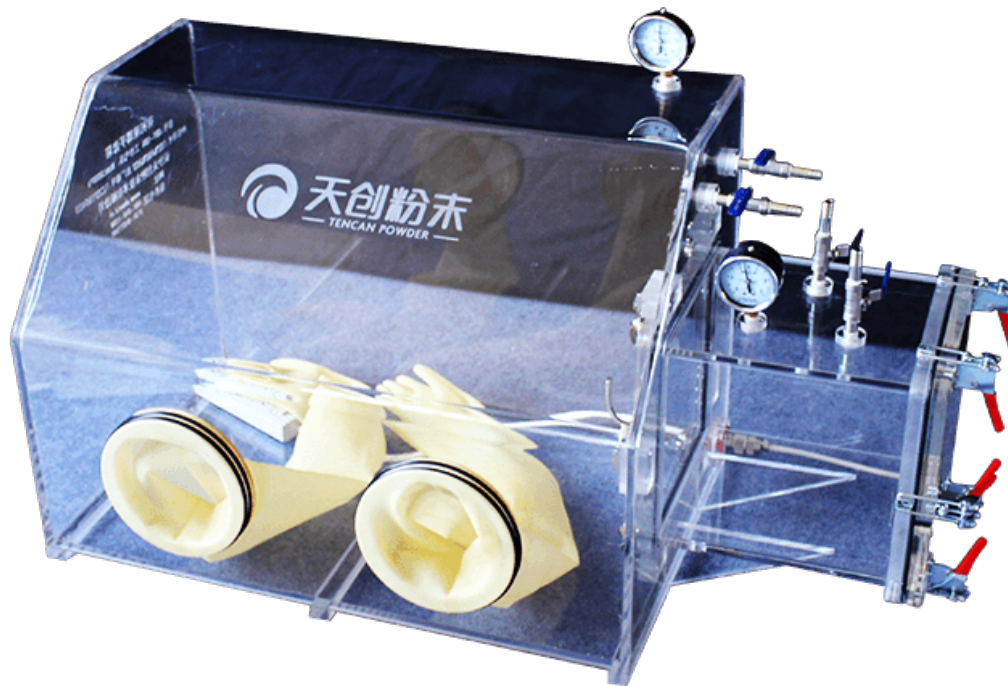


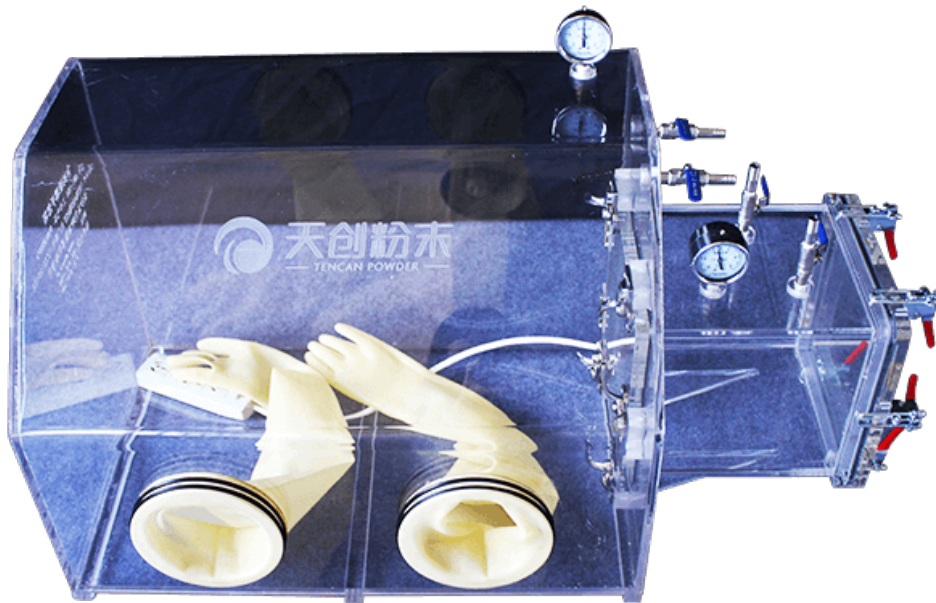


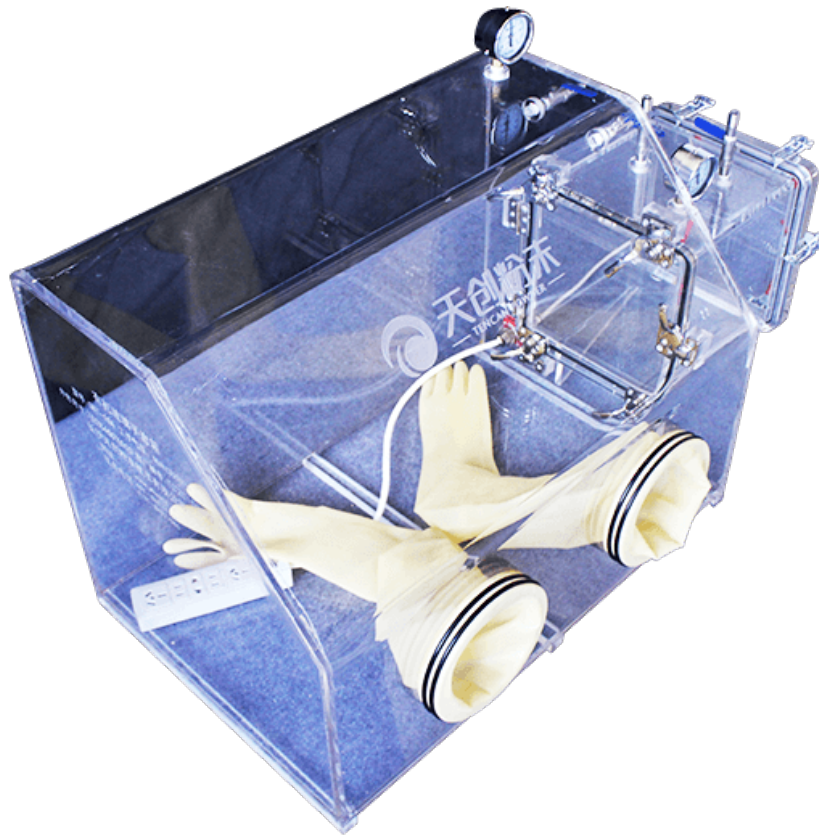

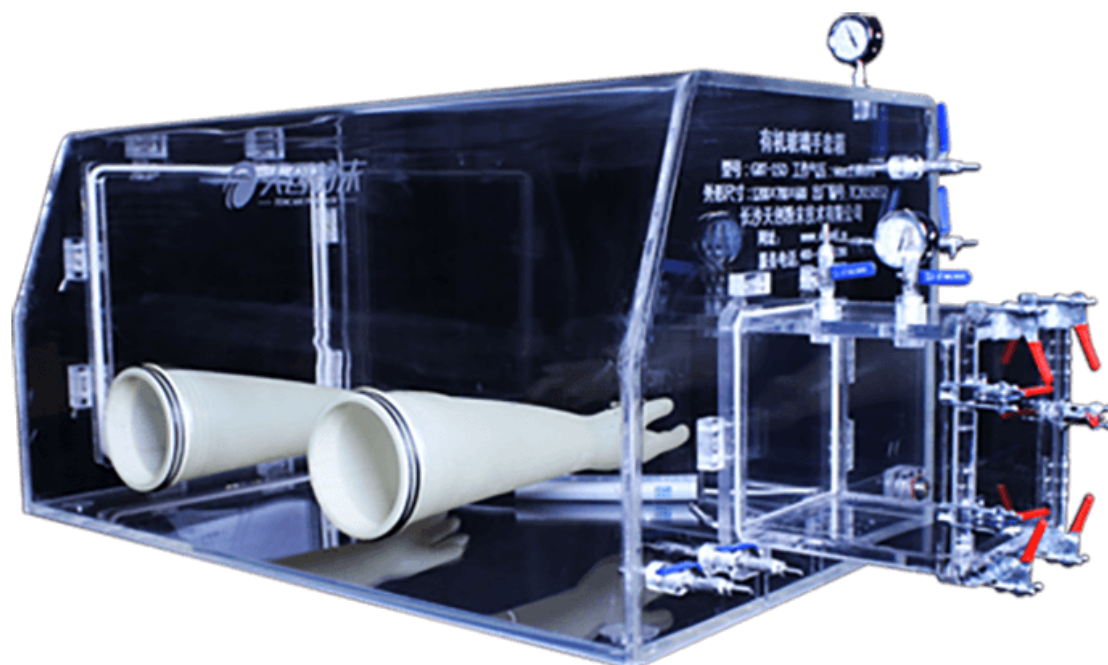

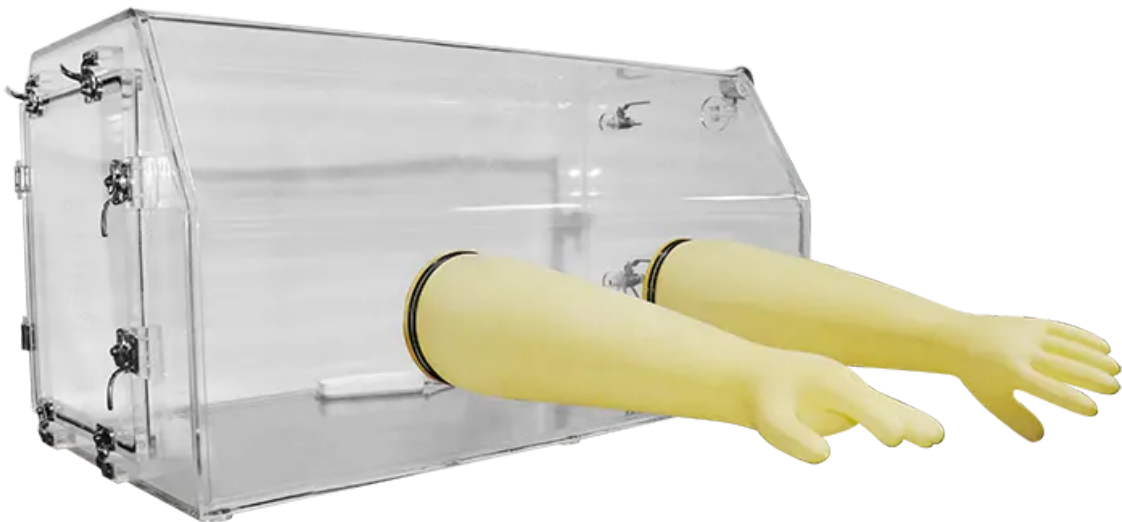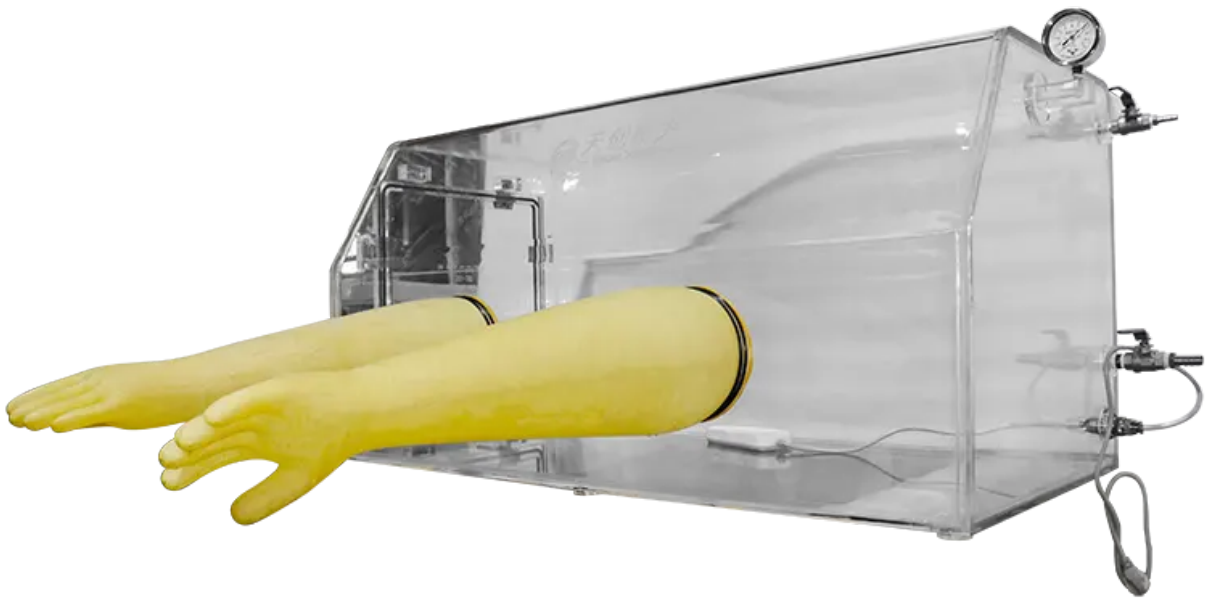

Во время научных экспериментов некоторые вещества легко окисляются и растворяются в атмосфере, что очень затрудняет химическую реакцию испытуемого вещества и предварительную обработку образца, влияя на процесс испытания и результаты испытаний. Вакуумный перчаточный бокс из плексигласа (также известный как вакуумный рабочий ящик с инертным газом) эффективно решает эти проблемы. Это устройство позволяет безопасно вставлять и вынимать тестовые образцы, а также свободно эксплуатировать, реагировать и тестировать в бескислородном и безводном состоянии, обеспечивая нормальное проведение научных экспериментов.

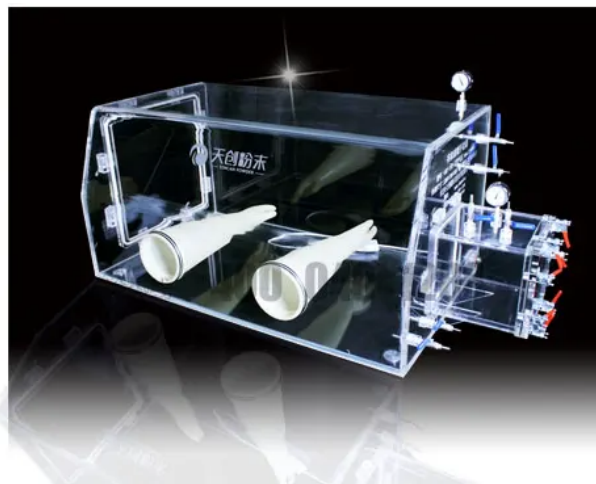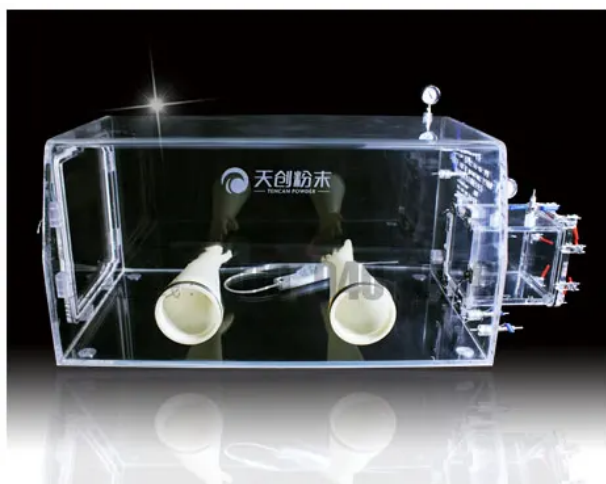

- 01** Он имеет простую структуру, прост в использовании, пропускает ультрафиолетовый свет и легкий;
- 02** В нормальных условиях его форма стабильна, прозрачна и устойчива к химической коррозии и изменению климата;
- 03** Ящик оснащен электрическими розетками с несколькими отверстиями для облегчения научных экспериментов;
- 04** Он обладает хорошими герметизирующими характеристиками и может экранировать и поглощать α -лучи и низкоэнергетические β -лучи, испускаемые радиоактивными материалами, для защиты тканей человека от повреждения ионизирующим излучением. Таким образом, он может сотрудничать с научно-исследовательскими подразделениями при проведении экспериментальных работ по низкоэнергетическим радиоактивным веществам, асептических операциях по микробной инокуляции, качественном и количественном анализе химических веществ, а также других связанных с этим операциях по закрытой изоляции, причем все эти операции могут выполняться в операционном боксе.

Контакты

Changsha Tianchuang Powder Technology Co., Ltd. / Чанша, провинция Хунань, Китай

Электронная почта: lichang0516@gmail.com

Телефон / WhatsApp: +86 731 84027560 / WhatsApp +86 19021571516

<https://www.tencanballmills.com/products/glove-box/acrylic-glove-box.html>

Перед работой изучите инструкцию выбранной модели и требования к обрабатываемому материалу.